



Neue Edition

**VivaStyle® – Der professionelle Weg zum Weiss
Fragen und Antworten**

ivoclar
vivadent
passion vision innovation


VivaStyle®


**Der professionelle Weg
zum Weiss**

**Schöne, weisse Zähne für
ein strahlendes, gewinnendes
Lächeln:
Professionelle Zahnaufhellung
macht es möglich.**

Wie funktioniert das?

**Hier sind die Antworten auf
die häufigsten Fragen zur
Zahnaufhellung.**

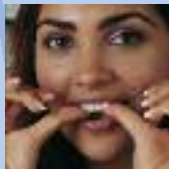

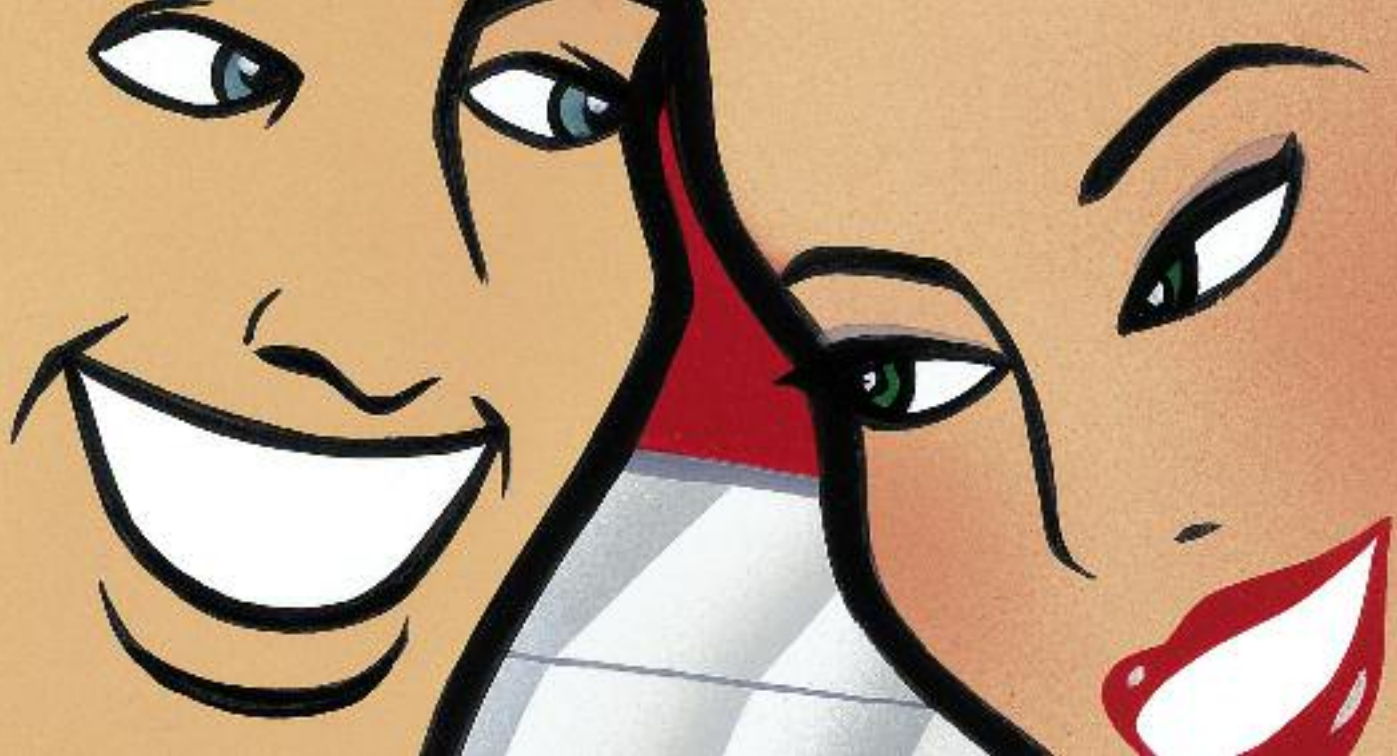




Wie entstehen Verfärbungen meiner Zähne?

Vieles kann die Farbe der Zähne beeinträchtigen: Bestimmte Nahrungsmittel und Getränke, Rauchen, Medikamente und Erkrankungen können zu unschönen Verfärbungen führen. Auch mit zunehmendem Alter werden die Zähne meist dunkler.



Ist Zahnverfärbung Schicksal?

Nein. Heute gibt es sehr wirksame Gegenmassnahmen. Eine erfolgreiche und bewährte Methode ist die von Ihrem Zahnarztteam begleitete und kontrollierte professionelle Zahnaufhellung.

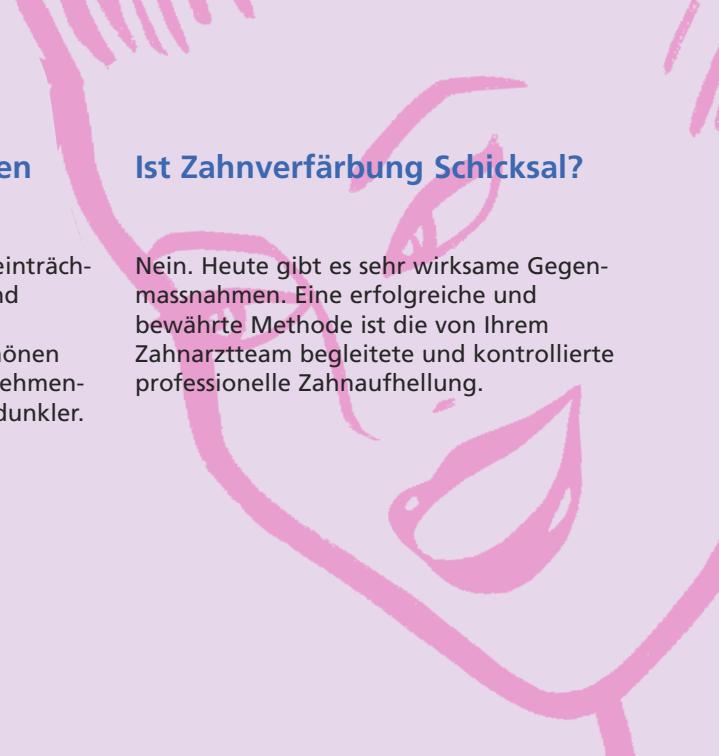

Professionelle Zahnaufhellung – Wie funktioniert das?

Ein Aufhellungsmittel, z.B. aus der VivaStyle Linie von Ivoclar Vivadent, wird mit den Zähnen in Kontakt gebracht. VivaStyle setzt Sauerstoff frei, der schonend die Zahnverfärbungen aufhellt. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Für VivaStyle-Gel brauchen Sie eine spezielle Schiene. Das Lacksystem VivaStyle Paint On Plus tragen Sie dagegen mit einem Pinsel direkt auf die Zähne auf.

Die Behandlung nimmt je nach Indikation und Produkt zwischen 10 Minuten bis einer Stunde Ihrer Zeit pro Anwendung in Anspruch.


Wie geht das mit der Schiene?

Nach der zahnärztlichen Untersuchung wird ein Abdruck Ihrer Zähne genommen. Für Sie wird eine Schiene angefertigt, die mit dem Aufhellungsgel befüllt wird. Je nach Präparat erfolgt die Anwendung zuhause oder unter voller professioneller Betreuung in der Zahnarztpraxis.



VivaStyle setzt Sauerstoff (O₂) frei, der Verfärbungen aufhellt.






Woher weiss ich, welche Methode für mich geeignet ist?

Anfangs stellt Ihr Zahnarzt auf der Grundlage seines Befundes einen Behandlungsplan auf. Auf dieser Basis empfiehlt er Ihnen die passende Behandlung. Falls Sie die Zahnaufhellung zuhause durchführen, wird Ihre Schiene hergestellt und die Handhabung erklärt. Genauso erfahren Sie, was Sie im Fall der Lackanwendung zu beachten haben. Danach führen Sie die Behandlung bis zur Kontrolluntersuchung entsprechend der Anleitung Ihres Praxisteam's bequem zuhause durch.

Kann jeder eine Zahnaufhellung durchführen?

Nein. Gehen Sie auf jeden Fall zu Ihrem Zahnarzt. Bestimmte Personen, zum Beispiel kleine Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter, sind von der Behandlung ausgeschlossen. Ihr Zahnarzt wird Ihnen sagen, ob die Zahnaufhellung für Sie in Frage kommt.

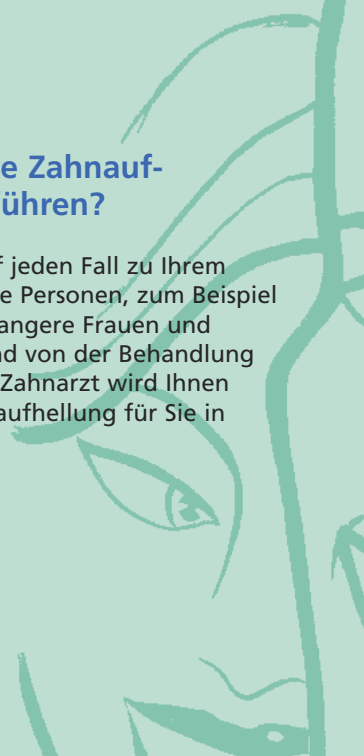


Wie lange dauert die Behandlung?

Das hängt von der Ursache und dem Ausmass der Verfärbungen ab. In vielen Fällen wird schon nach wenigen Anwendungen eine Aufhellung sichtbar. Durch Nahrungsmittel verursachte Verfärbungen sind meistens nach 10–12 Tagen verschwunden. Im Fall von Verfärbungen, die durch Medikamente oder eine Erkrankung bedingt sind, kann die Behandlung mehrere Monate dauern.

Werden die Zähne bei jedem Menschen gleich hell?

Nein, das ist ganz individuell. Die ursprüngliche natürliche Zahnfarbe und auch die Ursache der Verfärbungen spielen eine Rolle.



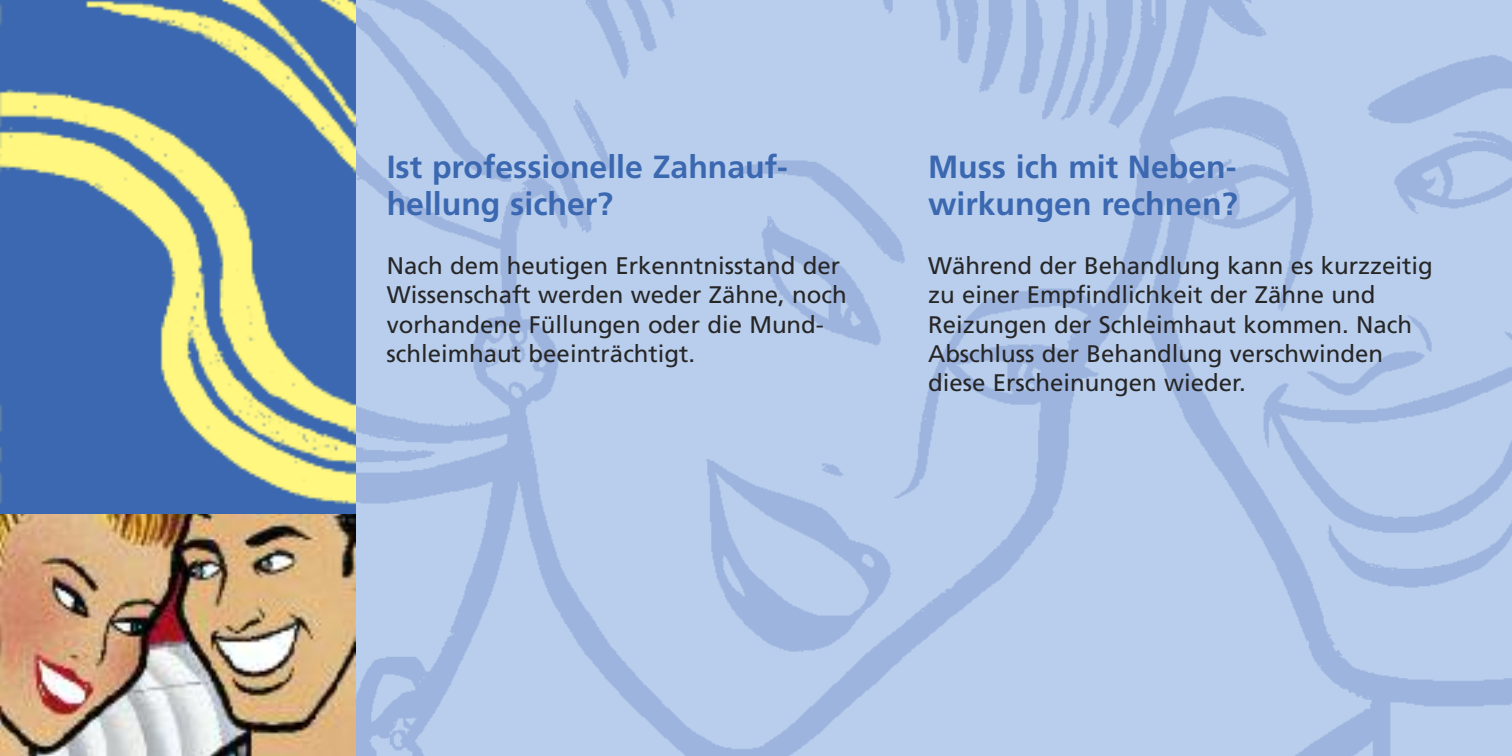

Ist professionelle Zahnaufhellung sicher?

Nach dem heutigen Erkenntnisstand der Wissenschaft werden weder Zähne, noch vorhandene Füllungen oder die Mundschleimhaut beeinträchtigt.

Muss ich mit Nebenwirkungen rechnen?

Während der Behandlung kann es kurzzeitig zu einer Empfindlichkeit der Zähne und Reizungen der Schleimhaut kommen. Nach Abschluss der Behandlung verschwinden diese Erscheinungen wieder.



Kann ich diese Effekte vermeiden oder zumindest reduzieren?


Ja, während der Behandlung sollten Zitrusfrüchte und säurehaltige Getränke vermieden werden. Die Verwendung eines Produktes (z.B. aus der VivaStyle-Linie) vermindert das Risiko von Reizungen und Empfindlichkeiten.

Auch die gute Passform der Schiene und das richtige Befüllen mit dem Gel tragen zum Wohlbefinden bei. In Ihrer Zahnarztpraxis erhalten Sie die entsprechenden Informationen, die Sie bei der Behandlung unbedingt befolgen sollten.

Wie lange wirkt die professionelle Zahnaufhellung?

Das hängt stark von Ihrem Lebensstil ab: Der Behandlungserfolg hält normalerweise von einem bis zu vier Jahren an. Ernährungsgewohnheiten, Rauchen, Alter und Zahnpflege haben einen entscheidenden Einfluss auf die Dauer der Wirkung. Zum Beispiel kann häufiger Genuss von Kaffee, Rotwein oder Tee sowie Rauchen schnell wieder zu einer Verdunkelung der Zähne führen.






Wie erhalte ich aufgehellte Zähne möglichst lange weiss?

Gute Mundhygiene ist die Basis für langfristig schöne Zähne. Regelmässige professionelle Zahnreinigung in der Praxis stützt den Behandlungserfolg. Sollten die Zähne wieder nachdunkeln, kann die Behandlung mit VivaStyle oder VivaStyle Paint On Plus wiederholt werden. Dabei werden in der Regel sehr viel weniger Anwendungen erforderlich sein als bei der Erstbehandlung.



Werden Füllungen und Kronen auch mit aufgehell?

Nein. Professionelle Zahnaufhellung wirkt nur auf die natürliche Zahnschmelze. Ihr Zahnarzt wird Sie beraten, ob eine Zahnaufhellung für Ihre Zähne sinnvoll ist, da Füllungen und Kronen gegebenenfalls zu erneuern sind.

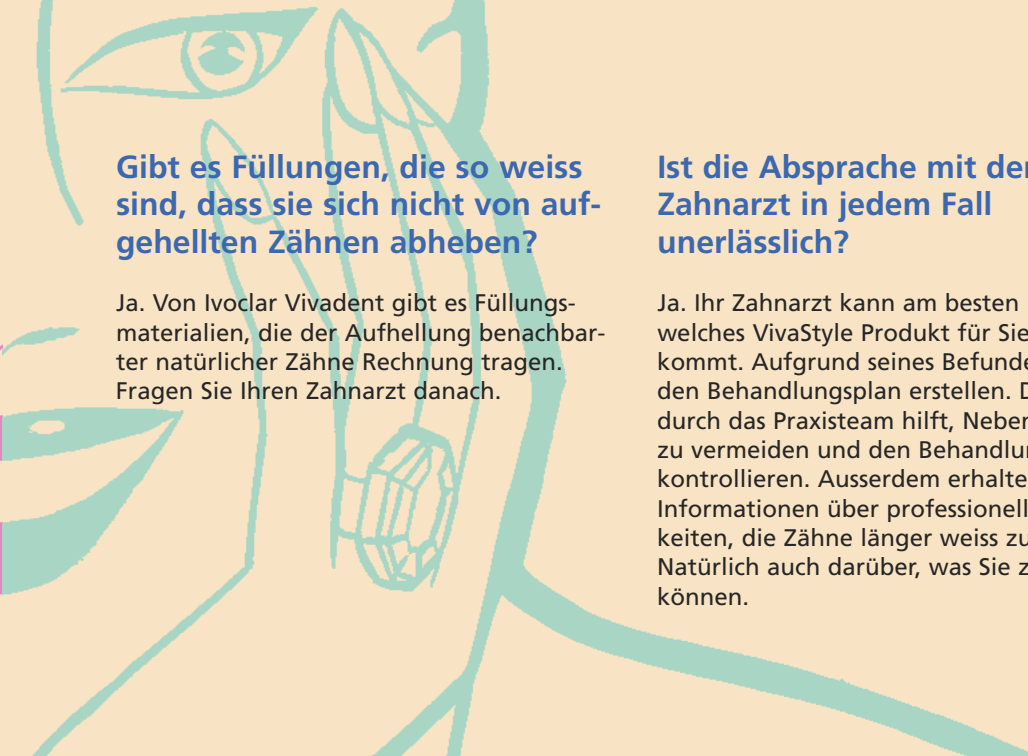

Gibt es Füllungen, die so weiss sind, dass sie sich nicht von aufgehellten Zähnen abheben?

Ja. Von Ivoclar Vivadent gibt es Füllungsmaterialien, die der Aufhellung benachbarter natürlicher Zähne Rechnung tragen. Fragen Sie Ihren Zahnarzt danach.

Ist die Absprache mit dem Zahnarzt in jedem Fall unerlässlich?

Ja. Ihr Zahnarzt kann am besten beurteilen, welches VivaStyle Produkt für Sie in Frage kommt. Aufgrund seines Befundes kann er den Behandlungsplan erstellen. Die Beratung durch das Praxisteam hilft, Nebenwirkungen zu vermeiden und den Behandlungserfolg zu kontrollieren. Ausserdem erhalten Sie Informationen über professionelle Möglichkeiten, die Zähne länger weiss zu halten. Natürlich auch darüber, was Sie zuhause tun können.



VivaStyle® – Der professionelle Weg zum Weiss

Gönnen Sie sich ein strahlendes Lächeln!
Ihr Praxisteam sagt Ihnen, wie's geht!

Praxisstempel

Hersteller und Vertrieb:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49(0)7961 / 8 89-0
Fax +49(0)7961 / 6326
www.ivoclarvivadent.de
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation